



Simulador De Palpación De Cólico Equino

Con Venopunción Del Cuello Equino E Inyección Intramuscular

Experimenta el siguiente nivel de entrenamiento práctico equino con el Simulador de Palpación de Cólicos en Equinos — un modelo realista y anatómicamente preciso diseñado para elevar la educación veterinaria y el desarrollo de habilidades. Modelado a partir de un Quarter Horse de 15-hand, este simulador versátil permite a los usuarios realizar con confianza procedimientos esenciales, incluidos el diagnóstico de cólico mediante la palpación rectal, la inseminación artificial, la abdominocentesis y las técnicas de acceso vascular.

Para una mayor versatilidad, incluye un modelo extraíble para punción venosa yugular e inyección intramuscular en el cuello del equino, que proporciona práctica realista para extracciones de sangre yugular, colocación de catéteres y inyecciones intramusculares. Ya sea utilizado como sistema integrado o como unidad independiente, este simulador ofrece una experiencia de entrenamiento auténtica y repetible que desarrolla confianza, precisión y pericia en procedimientos.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

• Construcción equina realista

Modelado a partir de un Quarter Horse de 15 manos. Construcción duradera de epoxi/fibra de vidrio reforzada con acero y materiales resistentes al agua para facilitar la limpieza.

• Anatomía interna detallada

- Tracto gastrointestinal inflable de 5 secciones de látex: colon ventral derecho e izquierdo, colon dorsal derecho y colon dorsal izquierdo, y ciego, además de una sección de intestino delgado e 3m.
- Bazo y riñón izquierdo conectados mediante el ligamento renoesplénico.
- Aorta palpable con pulso simulado.
- Útero realista con cervix, uretra y ligamento ancho.
- Tres conjuntos intercambiables de ovarios: anestro, estro y estro con folículos.

• Función de abdominocentesis

Almohadilla reemplazable, reservorio de fluido y línea alba palpable proporcionan práctica realista de muestreo y recolección de fluidos.

• Características externas


Cola desmontable, panel perineal suave, réplica de pelvis de poliuretano y recto inflable de vinilo facilitan una palpación y manipulación precisas.

• Módulo de cuello y cabeza desmontable

El modelo de venopunción del cuello equino y de inyección IM se puede separar para uso independiente o integrarse con el simulador. Incluye:

- Venas yugulares palpables
- Vena de látex reemplazable
- Sistema venoso presurizado que simula el flujo sanguíneo
- Piel resistente con crin
- Sitio de inyección intramuscular (IM)
- Cabeza de silicona blanda con orejas flexibles y puntos de referencia faciales detallados para inyección

Simulador de cólico equino para palpación con soporte | 1025584
Simulador de cólico equino para palpación | 1025566

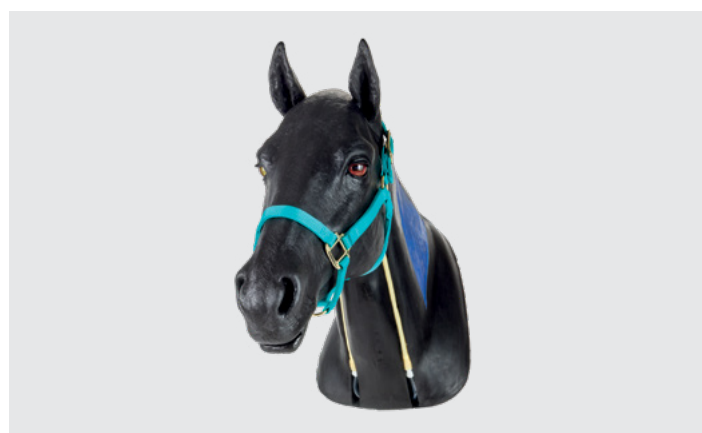

HABILIDADES DEL DÍA UNO & BENEFICIOS DEL PRODUCTO

Con el Simulador de Palpación de Cólico Equino, los estudiantes pueden:

- Identificar el cólico y realizar exámenes rectales para localizar órganos clave como el bazo, el riñón y el útero
- Practicar la inseminación artificial y otros procedimientos reproductivos utilizando una anatomía interna realista
- Realizar abdominocentesis para la toma de muestras de líquido con precisión táctil
- Ejecutar procedimientos vasculares, incluyendo la punción yugular para la extracción de sangre y la colocación de catéter utilizando el módulo de cuello desmontable
- Perfeccionar técnicas de inyección intramuscular utilizando puntos anatómicos definidos

El Modelo de Venopunción Yugular & de Inyección Intramuscular Equino se puede separar del cuerpo del caballo y puede utilizarse como unidad independiente. También está disponible para compra por separado.

PIEZAS REEMPLAZABLES

Venas Yugulares Equinas (Juego de 10)	1025577
Abdominocentesis Equina (Punción Abdominal)	1025567
Aorta Equina	1025596
Pelvis para Cólico Equino	1025574
Tracto Gastrointestinal Equino con Intestino Delgado	1025575
Riñón Equino	1025597
Crin para Venopunción del Cuello Equino	1025571
Cubierta Cutánea para Venopunción del Cuello Equino, Negra	1025569
Venopunción del Cuello Equino y Intramuscular	1025599
Inyección con Soporte	1025581
Juego de Ovarios Equinos con Estuche	1025572
Conjunto del Tracto Reproductor Equino	1025573
Intestino Delgado Equino	1025578
Bazo Equino	1025578



SI TIENE ALGUNA PREGUNTA O NECESITA ASISTENCIA, POR FAVOR
ESCANEE AQUÍ



3B Scientific Group

Headquarters · Ludwig-Erhard-Strasse 20 · 20459 Hamburg · Germany · 3bscientific.com