



Atlar İçin Kolik Palpasyon Simülatörü

At Boyun Venipunktörü Ve Kas İçi Enjeksiyon İle

At Palpasyon Kolik Simülatörü ile uygulamalı at eğitiminde bir sonraki seviyeyi deneyimleyin — veteriner eğitimi ve uygulamalı beceri gelişimini artırmak amacıyla tasarlanmış, gerçeğe yakın ve anatomik olarak doğru bir model. 15 el yüksekliğinde Quarter Horse (Amerikan Quarter Atı) örnek alınarak modellenmiş bu çok yönlü simülatör, kullanıcıların rektal palpasyon yoluyla kolik tanısı koyma, yapay tohumlama, abdominocentez ve vasküler erişim teknikleri gibi temel prosedürleri güvenle gerçekleştirmelerine olanak tanır.

Daha fazla çok yönlülük için, çıkarılabilir bir At Boyun Venipunktörü ve Kas İçi Enjeksiyon Modeli içerir; bu model boyun toplardamarından kan alma, kateter yerleştirme ve kas içi enjeksiyonlar için gerçekçi uygulama olanağı sağlar. İster entegre bir sistemin parçası olarak ister bağımsız bir ünite şeklinde kullanılsın, bu simülatör güven, doğruluk ve prosedürel uzmanlığı geliştiren otantik, tekrarlanabilir bir eğitim deneyimi sunar.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

• Gerçekçi At Yapısı

15 el yüksekliğinde bir Quarter Horse (Amerikan Quarter Atı) temel alınarak modellenmiştir. Çelik takviyeli epoksi/fibreglas konstrüksiyon, kolay temizleme için suya dayanıklı malzemelerle dayanıklı şekilde üretilmiştir.

• Detaylı İç Anatomi

- 5 bölümlü şişirilebilir lateks GI traktı: sağ ve sol ventral kolon, sağ ve sol dorsal kolon ve çekum, ayrıca 3m ince bağırsak bölümü.
- Dalak ve sol böbrek renoşplenik ligaman ile bağlantılı.
- Palpe edilebilir aorta, simüle nabız ile.
- Serviks, üretra ve ligamentum latum (geniş ligament) içeren gerçekçi uterus.
- Üç değiştirilebilir over seti: anöstrus, östrus ve foliküllü östrus.

• Abdominocentez Fonksiyonu

Değiştirilebilir ped, sıvı haznesi ve palpe edilebilen linea alba, gerçekçi örneklem ve sıvı toplama pratiği sağlar.

• Dış Özellikler


Çıkarılabilir kuyruk, yumuşak perine paneli, poliüretan pelvis replikası ve şişirilebilir vinil rektum doğru palpasyon ve manipülasyonu destekler.

• Çıkarılabilir Boyun ve Baş Modülü

At Boynu Venipunktur ve Kas İçi (IM) Enjeksiyon Modeli, bağımsız kullanım veya simülatöre entegrasyon için ayrılabilir.

Özellikleri şunlardır:

- Palpe edilebilir juguler venler
- Değiştirilebilir lateks ven
- Kan akışını simüle eden basınçlı ven sistemi
- Yeleli dayanıklı dış kaplama
- İntramusküler (IM) enjeksiyon bölgesi
- Yumuşak silikon baş; esnek kulaklar ve detaylı yüz enjeksiyon işaretleri

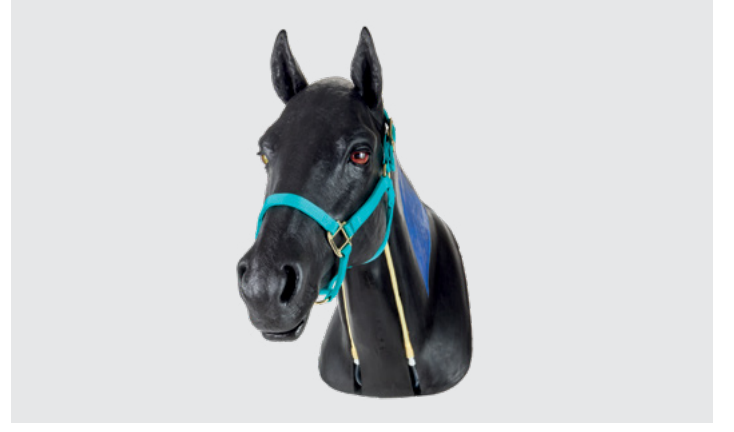

İLK GÜN BECERİLERİ & ÜRÜN FAYDALARI

At Palpasyon ve Kolik Simülatörü ile öğrenenler şunları yapabilir:

- Kolik tespit etmek ve rektal muayeneler yaparak dalak, böbrek ve rahim gibi önemli organların yerini belirlemek
- Suni tohumlama ve diğer üreme işlemlerini gerçekçi iç anatomiye kullanarak uygulama pratiği yapmak
- Sıvı örneklemesi için dokusal hassasiyetle karın ponksiyonu yapmak
- Vasküler işlemleri, juguler kan alma ve kateter yerleştirme dahil çıkarılabilir boyun modülünü kullanarak gerçekleştirmek
- Tanımlanmış anatomik referans noktalarını kullanarak intramusküler enjeksiyon tekniklerini geliştirmek

At Boynu Venipunktur ve Kas İçi Enjeksiyon Modeli atın gövdesinden çıkarılabilir ve bağımsız bir ünite olarak kullanılabilir. Ayrıca ayrı olarak satın alınabilir.

Standlı At Kolik Palpasyon Simülatörü

| 1025584

At Kolik Palpasyon Simülatörü

| 1025566



DEĞİŞTİRİLEBİLİR PARÇALAR

At Juguler Venler (10'lu Set)	1025577
At Abdominocentez (Karın Sıvısı Alma)	1025567
At Aortası	1025596
At Kolik Pelvisi	1025574
At GI Traktı (İnce Bağırsak Dahil)	1025575
At Böbreği	1025597
At Boyun Venipunktörü Yeleli	1025571
At Boyun Venipunktörü Deri Örtüsü, Siyah	1025569
At Boyun Venipunktörü ve İntramusküler Enjeksiyon Standı ile	1025599
At Yumurtalık Seti, Kılıflı	1025581
At Üreme Sistemi Montajı	1025572
At İnce Bağırsak	1025573
At Dalak	1025578

EĞER HERHANGİ BİR SORUNUZ VARSA VEYA DESTEĞE İHTİYACINIZ OLURSA, LÜTFEN BURAYI TARAYIN



3B Scientific Group

Headquarters · Ludwig-Erhard-Strasse 20 · 20459 Hamburg · Germany · 3bscientific.com