



SIMULADOR NASOGÁSTRICO EQUINO

El VSI Equine Nasogastric Simulator es una parte esencial de los estudios clínicos en la práctica veterinaria. Nuestro simulador equino, realista en su presentación y tamaño, ofrece a los estudiantes la oportunidad de utilizar características anatómicas para ensayar procedimientos clínicos en un entorno controlado. A través de la simulación, los estudiantes adquirirán la confianza y experiencia necesarias antes de pasar a animales vivos.

Además, es compatible con el Equine Dystocia Simulator.

COMPETENCIAS DESDE EL PRIMER DÍA & BENEFICIOS DEL PRODUCTO

Intubación Nasogástrica

- Réplica del pasaje nasal que simula la estructura anatómica, permitiendo a los estudiantes practicar la inserción del tubo de intubación a través del esófago.
- La representación precisa de la anatomía interna posibilita confirmar la colocación del tubo en el esófago mediante un punto de referencia visual en el lado izquierdo del cuello. Los estudiantes pueden continuar introduciendo el tubo en la cámara del estómago.
- Se pueden realizar pruebas de olfato y/o succión para verificar la correcta ubicación del tubo en la cámara del estómago.
- Se puede simular la técnica de lavado y la administración de fluidos.

Venopunción e Inyección Intramuscular

- Punción yugular con venas fácilmente palpables
- Tubo venoso de látex, fácilmente reemplazable y diseñado para soportar múltiples punciones durante la simulación
- El sistema mecánico de presurización venosa permite una presión positiva para la extracción de sangre (aguja de calibre 20-22 recomendada para la simulación).
- Sitio intramuscular diseñado para soportar múltiples punciones y administrar inyecciones de fluidos.
- Cabeza de silicona blanda, con orejas flexibles y anatomía detalladamente representada, que permite a los estudiantes identificar los sitios de inyección facial. La cabeza también es compatible con bit & bridle.
- Soporte rodante, ajustable en altura, con inclinación rostral y rotación de 90 grados

Simulador de sonda nasogástrica equina con soporte rodante 1025594

Simulador de sonda nasogástrica equina sin soporte rodante 1025593




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Soporte rodante de metal VSI
- Silicona duradera con armadura metálica
- Cabeza desmontable para facilitar el transporte y el reemplazo de componentes
- Cubierta de piel desmontable y lavable.
Puede ser reemplazada cuando presente desgaste
- Viene con 5 juegos de venas de repuesto

PARTES REEMPLAZABLES

- Venas 1025577
- Almohadillas Intramusculares 1025600
- Melena 1025571
- Cubierta de Piel 1025569

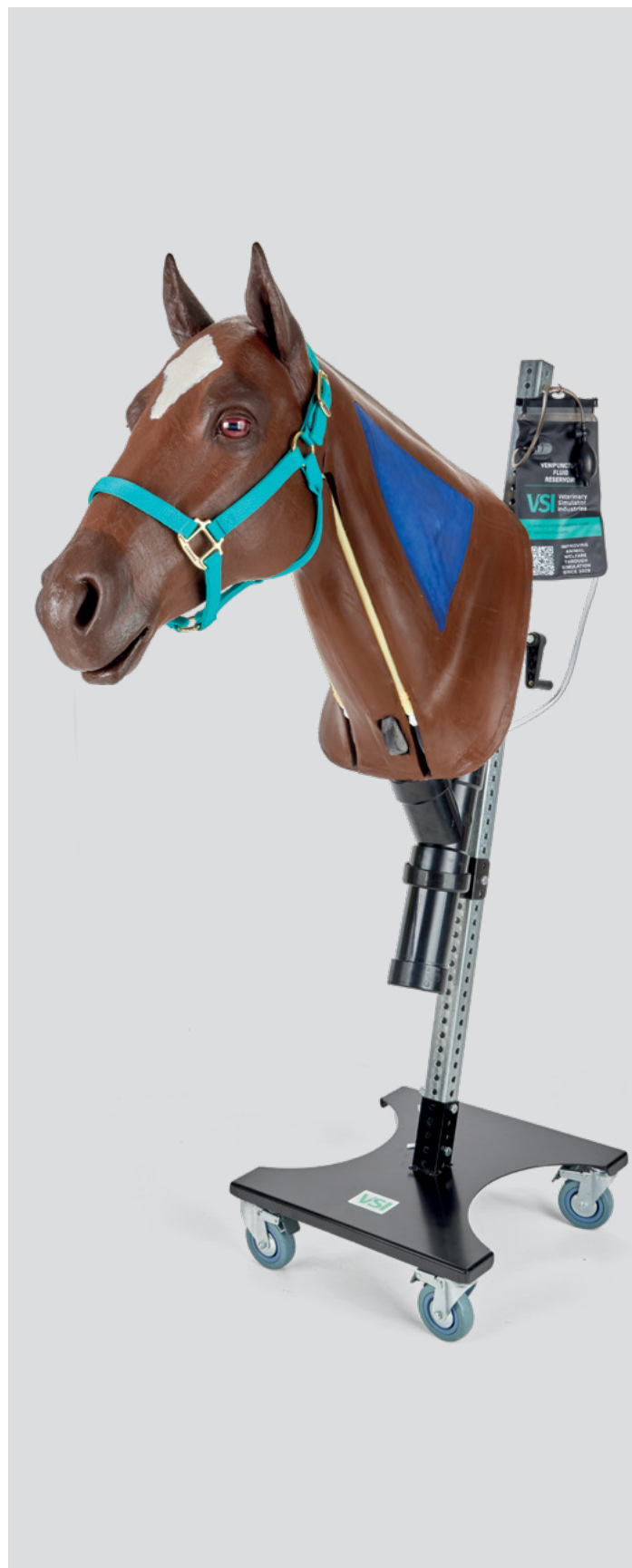

SI TIENE ALGUNA CONSULTA O NECESITA ASISTENCIA, POR FAVOR
ESCANEE AQUÍ



3B Scientific Group

Headquarters · Ludwig-Erhard-Strasse 20 · 20459 Hamburg · Germany · 3bscientific.com