



SIMULATORE NASOGASTRICO EQUINO

Il VSI Equine Nasogastric Simulator costituisce parte integrante degli studi clinici per la pratica veterinaria. Il nostro simulatore equino, realistico sia nella presentazione che nelle dimensioni, offre agli studenti l'opportunità di sfruttare le caratteristiche anatomiche per esercitarsi in procedure cliniche in un contesto controllato. Attraverso la simulazione, gli studenti acquisiranno la fiducia e l'esperienza necessarie prima di passare agli animali vivi.

Inoltre, è compatibile con l'Equine Dystocia Simulator.

COMPETENZE DAL PRIMO GIORNO E BENEFICI DEL PRODOTTO

Intubazione Nasogastrica

- Replica del passaggio nasale che simula la struttura anatomica mentre gli studenti si esercitano a far passare il tubo di intubazione attraverso l'esofago.
- L'anatomia interna ben realizzata consente allo studente di verificare il posizionamento del tubo nell'esofago grazie a un punto di riferimento visivo sul lato sinistro del collo. Gli studenti possono quindi procedere con il passaggio del tubo nella camera gastrica.
- È possibile eseguire un test olfattivo e/o di aspirazione per confermare il corretto posizionamento del tubo nella camera gastrica.
- Si possono simulare la tecnica del lavaggio e la somministrazione di fluidi.

Venipuntura e Iniezione Intramuscolare

- Venipuntura giugulare con vene palpabili
- Tubazione venosa in lattice facilmente sostituibile, in grado di resistere a più punture per scopi di simulazione
- Il sistema meccanico di pressurizzazione della vena garantisce una pressione positiva per il prelievo di sangue (ago da 20-22 gauge raccomandato per la simulazione).
- Sito intramuscolare progettato per resistere a numerose punture e per accettare iniezioni di fluidi
- Testa in silicone morbido con orecchie flessibili e anatomia accuratamente riprodotta, che consente agli studenti di individuare i siti di iniezione facciale. La testa accetta anche bit & bridles.
- Stand girevole, regolabile in altezza, con inclinazione rostro e rotazione a 90 gradi

Simulatore nasogastrico equino con supporto girevole 1025594

Simulatore nasogastrico equino senza supporto girevole 1025593




SPECIFICHE TECNICHE

- Supporto mobile in metallo VSI
- Silicone resistente con armatura in metallo
- Testa rimovibile per facilitare il trasporto e la sostituzione dei componenti
- Rivestimento in pelle rimovibile e lavabile. Può essere sostituito in caso di usura
- Viene fornito con 5 set di vene di ricambio

COMPONENTI SOSTITUIBILI

- Vene 1025577
- Pad intramuscolari 1025600
- Criniera 1025571
- Rivestimento in pelle 1025569

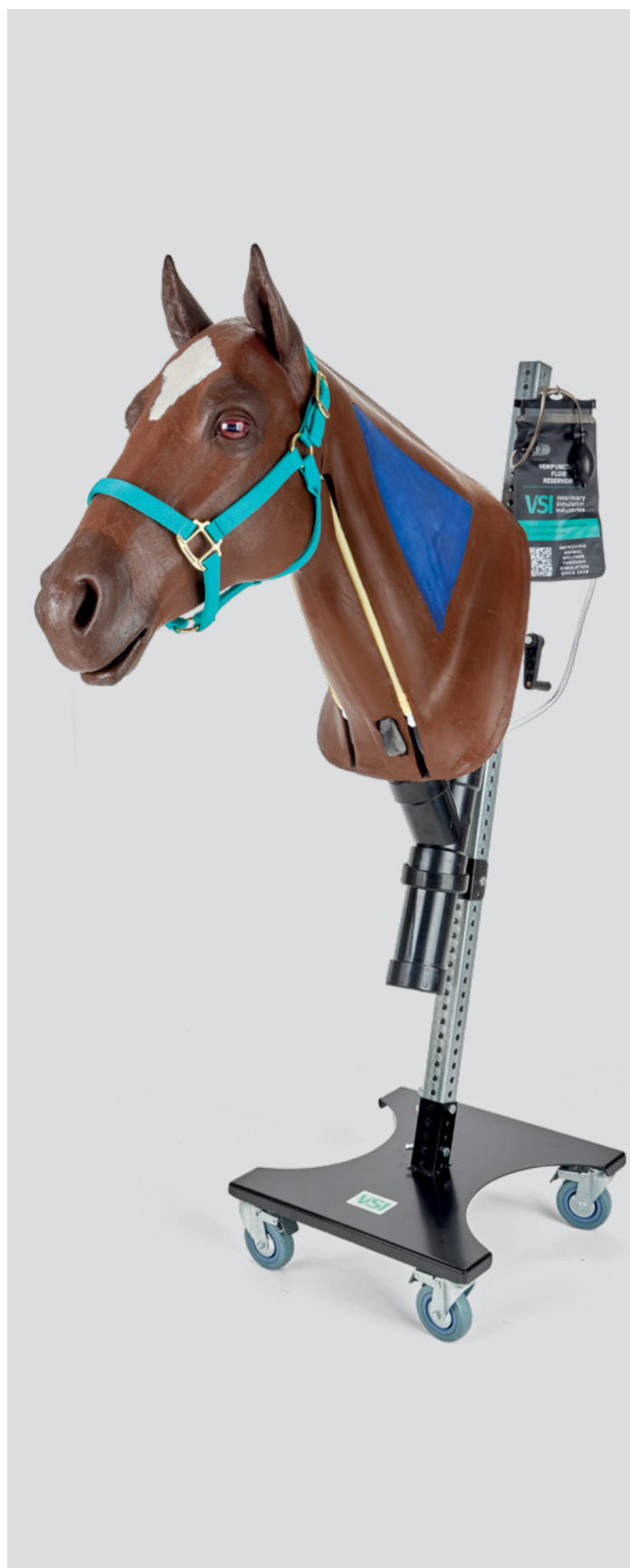

SE HAI DOMANDE O HAI BISOGNO DI SUPPORTO, SCANSIONA QUI



3B Scientific Group

Headquarters · Ludwig-Erhard-Strasse 20 · 20459 Hamburg · Germany · 3bscientific.com