



SIMULADOR DE SONDA NASOGÁSTRICA EQUINA

O Simulador Nasogástrico Equino da VSI é parte integrante dos estudos clínicos na prática veterinária. Nosso simulador equino apresenta realismo em sua apresentação e dimensão, oferecendo aos estudantes a oportunidade de utilizar características anatômicas para a prática de procedimentos clínicos em um ambiente controlado. Por meio da simulação, os estudantes adquirirão confiança e competência antes de avançarem para animais vivos.

Adicionalmente, é compatível com o Simulador de Distocia Equina.

HABILIDADES DO PRIMEIRO DIA & BENEFÍCIOS DO PRODUTO

Intubação Nasogástrica

- Réplica do trajeto nasal, simulando a estrutura anatômica durante a prática da passagem do tubo de intubação pelo esôfago.
- Anatomia interna reproduzida com detalhes, permitindo ao aluno confirmar a posição do tubo no esôfago por meio de um ponto de referência visual no lado esquerdo do pescoço. Em seguida, os alunos podem prosseguir com a inserção do tubo na câmara estomacal.
- Testes de olfato e/ou sucção podem ser realizados para indicar a posição adequada do tubo na câmara estomacal.
- A técnica de lavagem e a administração de fluidos podem ser simuladas.

Punção Venosa e Injeção Intramuscular

- Punção jugular com veias palpáveis
- Tubulação de veia em látex facilmente substituível, que suporta múltiplas punções para simulação
- Sistema mecânico de pressurização da veia, que permite a aplicação de pressão positiva para a coleta de sangue (agulha de calibre 20-22 recomendada para simulação)
- Local de aplicação intramuscular, capaz de suportar múltiplas punções e aceitar injeções de fluidos
- Cabeça em silicone macio, com orelhas flexíveis e anatomia bem reproduzida, permitindo aos alunos localizar os pontos de injeção facial. A cabeça também aceita bocado e rédea.
- Suporte rolante, ajustável para altura, inclinação rostral e rotação de 90 graus

Simulador Nasogástrico Equino com Suporte Móvel 1025594

Simulador Nasogástrico Equino sem Suporte Móvel 1025593




ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Suporte móvel de metal VSI
- Silicone durável com estrutura metálica
- Cabeça removível, facilitando o transporte e a substituição de componentes
- Revestimento removível e lavável. Pode ser substituído quando estiver desgastado
- Acompanha 5 conjuntos de veias de substituição

PEÇAS SUBSTITUÍVEIS

- Veias 1025577
- Almofadas Intramusculares 1025600
- Crina 1025571
- Cobertura de Couro 10255699

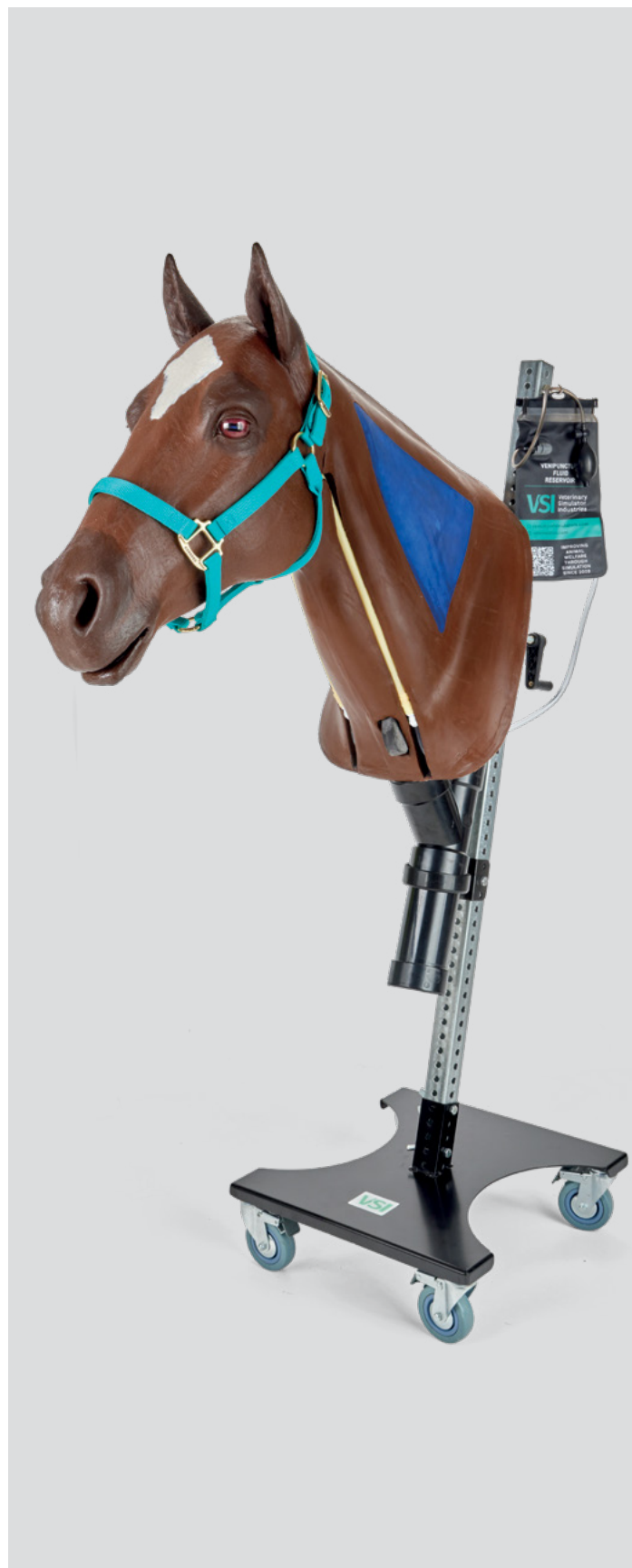

SE TIVER ALGUMA DÚVIDA OU PRECISAR DE SUPORTE, POR FAVOR,
ESCANEE AQUI



3B Scientific Group

Headquarters · Ludwig-Erhard-Strasse 20 · 20459 Hamburg · Germany · 3bscientific.com