



КОНСКИЙ НАЗОГАСТРАЛЬНЫЙ СИМУЛЯТОР

Симулятор назогастрального зонда для лошадей VSI является неотъемлемой частью клинического обучения во ветеринарной практике. Наш симулятор для лошадей обладает реалистичным внешним видом и размерами, что предоставляет студентам возможность использовать анатомические особенности для отработки клинических процедур в контролируемых условиях. Благодаря симуляции студенты приобретут уверенность и профессиональные навыки перед переходом к работе с живыми животными.

Кроме того, он совместим с Симулятором затрудненных родов для лошадей.

НАВЫКИ С ПЕРВОГО ДНЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

Назогастральная интубация

- Реплика носового прохода, имитирующая его анатомическую структуру, позволяет студентам практиковаться во введении трубки через пищевод.
- Детализированная внутренняя анатомия дает возможность студенту визуально подтвердить расположение трубки в пищеводе с помощью ориентировочного участка на левой стороне шеи. После этого трубку можно провести в желудочную полость.
- Можно провести тест на определение запаха и/или отсасывание для подтверждения правильного расположения трубки в желудке.
- Можно смоделировать технику промывания и введения жидкостей.

Venipuncture and Intramuscular Injection

- Пункция яремной вены с пальпируемыми венами.
- Легко заменяемые латексные венозные трубки, способные выдерживать многократные пункции при моделировании процедур.
- Механическая система создания давления в вене обеспечивает положительное давление для взятия крови (рекомендуется игла 20-22 калибра для моделирования).
- Мышечный участок, рассчитанный на многократные пункции и введение жидкостей.
- Мягкая силиконовая голова с гибкими ушами и детализированной анатомией позволяет студентам определять места для инъекций на лице. Голова также предназначена для использования с bit & bridle.
- Подвижная стойка, регулируемая по высоте, наклону вперед и 90-градусному повороту

Симулятор назогастрального зонда для лошадей с подвижной подставкой – 1025594

Симулятор назогастрального зонда для лошадей без подвижной подставки – 1025593




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- VSI металлический роликовый стенд
- Прочный силикон с металлическим каркасом
- Съемная головка для удобства транспортировки и замены компонентов
- Съемный/моющийся кожух, подлежащий замене при износе
- В комплекте 5 наборов заменяемых вен

СМЕННЫЕ ЧАСТИ

- Вены 1025577
- Внутримышечные прокладки 1025600
- Грива 1025571
- Покрытие шкуры 1025569

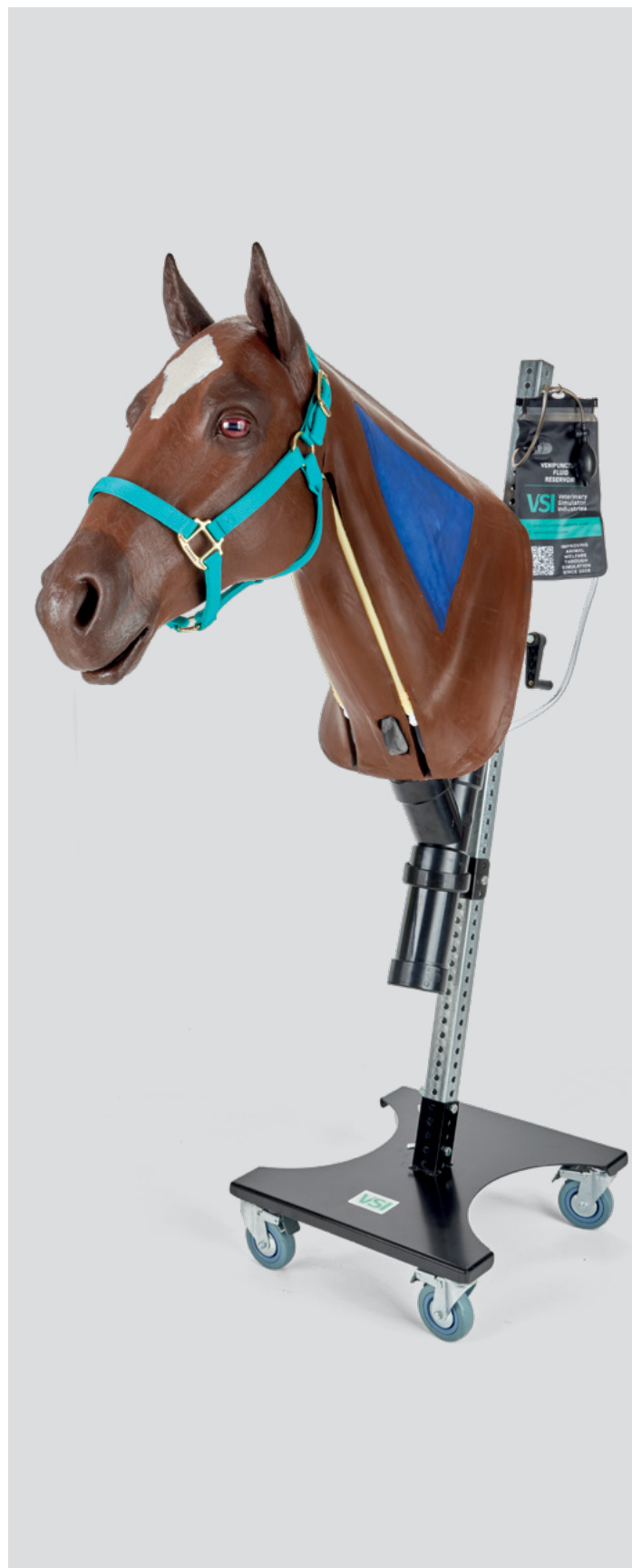

ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКНУТ ВОПРОСЫ ИЛИ ПОТРЕБУЕТСЯ ПОДДЕРЖКА, ПОЖАЛУЙСТА, ОТСКАНИРУЙТЕ ЗДЕСЬ



3B Scientific Group

Headquarters · Ludwig-Erhard-Strasse 20 · 20459 Hamburg · Germany · 3bscientific.com