


Обратная связь с Quality CPR

- Глубина массажа
- Частота массажа
- Процент массажа
- Полное выпрямление грудной клетки
- Правильность расположения рук
- Выдвижение нижней челюсти и запрокидывание головы
- Надлежащий объем вентиляции

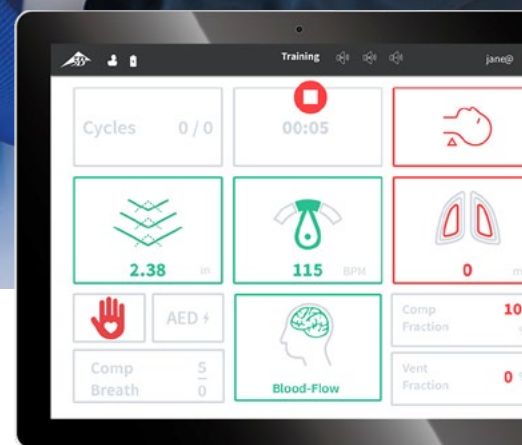


Обучение с Quality CPR

CPRLilly PRO +

Новый **манекен Quality CPR** позволяет преподавателям и медицинским работникам измерять, контролировать и анализировать выполнение СЛР **10 обучаемыми одновременно**. CPRLilly PRO+ помогает преподавателям повысить эффективность и продуктивность их занятий по обучению СЛР благодаря использованию нового **приложения CPRLilly** на планшете для контроля выполнения СЛР и получения объективной обратной связи перед переходом к обучению с Quality CPR.



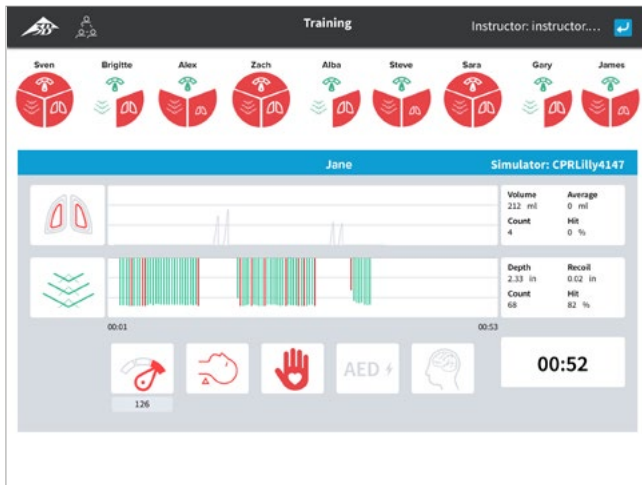

Преподаватель может в любой момент одним простым нажатием получить доступ к подробным сведениям о выполнении СЛР каждым из обучаемых

Основные возможности обучения:


- Обратная связь с Quality CPR с историей разборов
- Искусственная вентиляция методом «изо рта в рот» и «изо рта в нос»
- Искусственная вентиляция с помощью лицевой маски, карманной маски и мешка Амбу
- Поднятие грудной клетки с надлежащей вентиляцией
- Контроль правильности освобождения дыхательных путей
- Пульсация сонной артерии
- Возможность обучения размещению электродов автоматического внешнего дефибриллятора
- Бесплатное приложение доступно для скачивания на Google Play и iOS
- Непрерывный анализ параметров СЛР одновременно на до 10 манекенов
- Возможность индивидуальной оценки при групповом обучении для повышения эффективности обучения
- Возможность адаптации к различным концепциям обучающих курсов
- Приложение CPRLilly позволяет использовать упрощенный режим просмотра обратной связи студентов

Приобретите дополнительные функции сейчас и оснастите свои обучающие курсы манекенами для обучения СЛР с прямой обратной связью для выполнения рекомендаций АНА. CPRLilly PRO+ соответствует требованиям к прямой обратной связи и Quality CPR, содержащимся в рекомендациях АНА:

«Устройство с инструментальной прямой обратной связью измеряет частоту и глубину массажа, положение рук, возврат грудной клетки в исходное состояние и процент массажа и обеспечивает звуковую или визуальную обратную связь (или обе) в режиме реального времени для данных критически важных навыков выполнения СЛР.»

Манекен с планшетом 1022071

Манекен без планшета 1022237

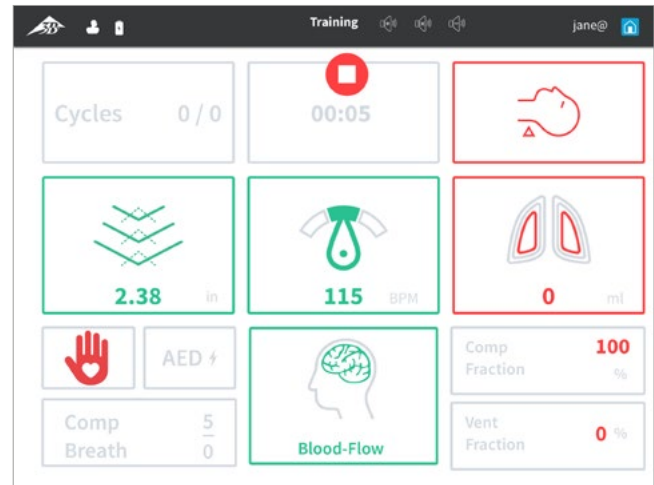

Обучаемые контролируют параметры СЛР в режиме упрощенного просмотра обратной связи и оттачивают свои навыки в реальном времени

Надежный манекен для эффективного обучения:

- Изготовлен в Германии из исключительно прочного безлатексного материала
- Возможность легкой замены масок лица и сменных легких без использования инструментов
- Легкость очистки благодаря гигиеничной системе дыхательных путей
- Бесшумность работы благодаря эффективному энергопотреблению и аккумуляторной батарее
- Надежное подключение по WiFi и интуитивный интерфейс приложения
- Практичная сумка для переноски с ковриком для удобства работы
- Манекен также доступен в исполнении с темным цветом кожи

Комплект поставки:

Обучающий манекен 1 CPRLilly PRO+, 1 планшет (в зависимости от модели), 1 зарядное устройство и аккумуляторная батарея, 4 маски нижней части лиц, 25 горловых мешков, 12 адаптеров для электродов АВД, 1 сумка для переноски с ковриком



БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО НАЙТИ НА ВЕБ-САЙТЕ [3BSIDENTIFIC.COM](http://3bscientific.com)



ООО «ЗБ Сайнтифик» • 196084, Россия, Санкт-Петербург • Московский пр., 79А, лит. А, офис 400
3bscientific.com • Тел.: +7 812 3342223 • Факс: +7 812 3347150 • e-mail: sales.spb@3bscientific.com