


## Motor Wankel, transparente 1002994

### Instrucciones de uso

04/12 JS

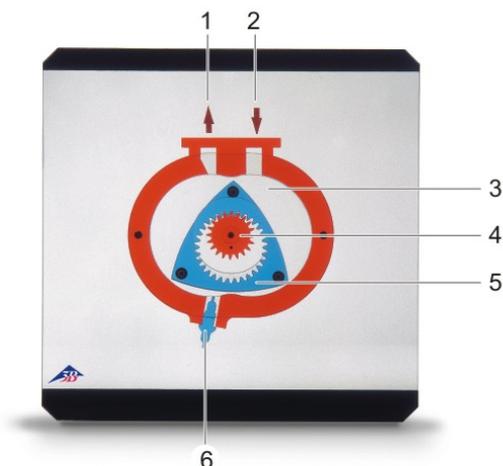

- 1 Salida
- 2 Entrada
- 3 Cámara
- 4 Árbol de excéntrica
- 5 Émbolo de rotación
- 6 Bujía de encendido

### 1. Descripción

El motor Wankel o motor de de émbolo circular trabaja según el principio de cuatro tiempos.

El émbolo de rotación triangular curvado transmite la fuerza y controla los procesos de cambio de la mezcla.

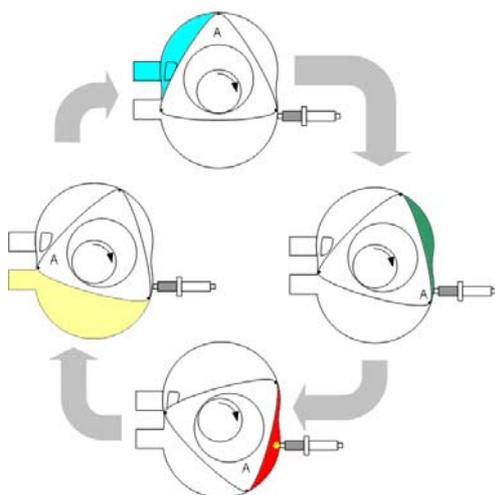


Fig. 1: Tiempos de trabajo del motor Wankel:  
Aspirar (arriba), Comprimir (a la derecha),  
encender (abajo), Expeler (a la izquierda)

### 2. Manejo

*Se recomienda adicionalmente:*

Retroproyector (230 V, 50/60 Hz) 1003264  
ó  
Retroproyector (115 V, 50/60 Hz) 1003263

- Se coloca la transparencia sobre el retroproyector.
- Con la mano se pasa secuencialmente a las posiciones que corresponden a las fases de trabajo.

